


Withings Sleep Analyzer

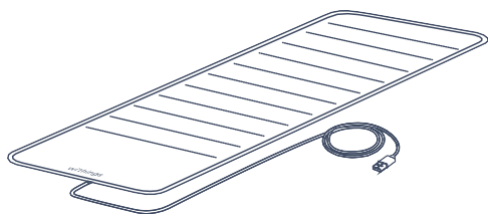

Краткая инструкция по установке

-2-

Благодарим вас за выбор Withings Sleep Analyzer


Нужна помощь?

⇒ [Withings.com/support/sleep](https://withings.com/support/sleep)

Это руководство доступно на дополнительных языках: www.withings.com/guides.

-3-

Комплектация

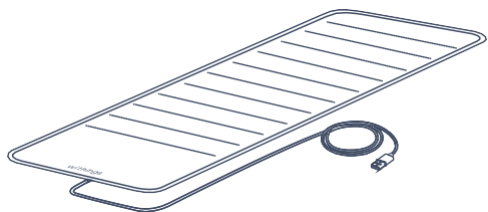

Датчик сна




Адаптер USB

-4-


Как установить Withings Sleep Analyzer

1. Разместите датчик сна целиком под вашим матрасом, чтобы он располагался под вашей грудью. Кабель должен выходить за край матраса.

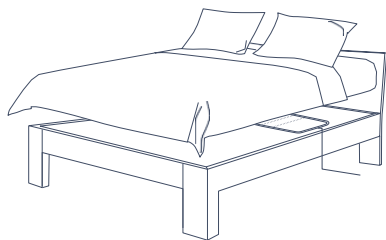

-5-

2. Подключите датчик к розетке с помощью входящего в комплект адаптера.

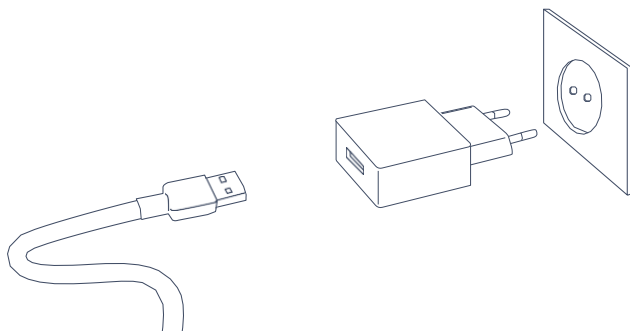

Как установить Withings Sleep Analyzer


3. Зайдите на сайт [withings.com](https://go.withings.com) со смартфона или планшетного компьютера и следуйте инструкциям по установке приложения Health Mate.

4. В приложении Health Mate следуйте инструкциям по установке Withings Sleep Analyzer.




Уход и техническое содержание

Для чистки текстильного чехла датчика осторожно снимите его с датчика. Чехол можно стирать в стиральной машине. Не сушите в машине и не гладьте. Дождитесь полного высыхания, прежде чем вернуть чехол на датчик.

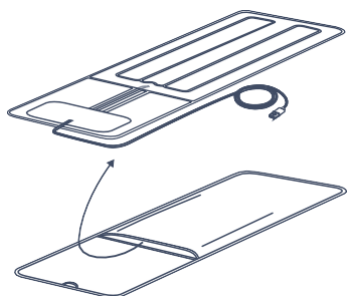

Внешний вид

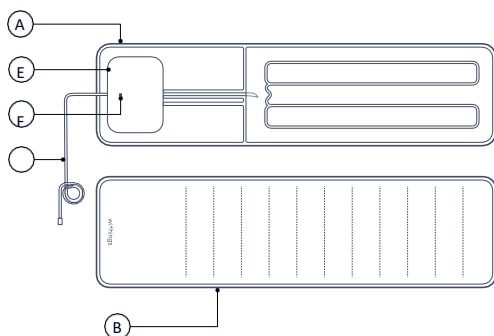

A – воздушная камера, B – текстильный чехол, C – USB-кабель, D – адаптер питания USB, E – датчик звука для регистрации храпа, F – светодиод настройки

Можно отключить датчик звука с помощью настроек в приложении Health Mate.

-10-

Предупреждение Федеральной комиссии по связи США

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения адекватной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать энергию в радиочастотном диапазоне и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретном случае установки. Если данное оборудование действительно создает вредные помехи приему радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним из следующих способов:

- Измените ориентацию или переместите принимающую антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке, к которой не подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Предупреждение Федеральной комиссии по связи США: Любые изменения или модификации, явно не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут привести к лишению пользователя права эксплуатировать данное оборудование.

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. При эксплуатации соблюдаются следующие два условия: (1) Данное устройство не должно создавать вредных помех и (2) данное устройство должно выдерживать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбой в работе.

Важная информация: Заявление о воздействии излучения

Изделие соответствует установленным в США пределам воздействия частот портативного радиооборудования (RF) для неконтролируемой окружающей среды, и безопасно для эксплуатации по назначению, как описано в данном руководстве. Для дальнейшего снижения радиочастотного воздействия следует держать устройство как можно дальше от тела пользователя или настраивать устройство на меньшую выходную мощность при наличии данной функции.

Этот передатчик не должен располагаться или работать совместно с какой-либо другой антенной или передатчиком.

Функция выбора кода страны будет отключена для продуктов, продаваемых в США.

-11-

Информация для пользователей в Канаде

Данное устройство соответствует требованиям стандарта Министерства промышленности Канады, не требующего лицензирования. При эксплуатации соблюдаются следующие два условия:

- (1) Данное устройство не должно создавать помех; и
- (2) Данное устройство должно выдерживать любые помехи, включая те, которые могут вызвать сбой в работе устройства.

Заявление о воздействии излучения

Изделие соответствует установленным в Канаде пределам воздействия частот портативного радиооборудования (RF) для неконтролируемой окружающей среды, и безопасно для эксплуатации по назначению, как описано в данном руководстве. Для дальнейшего снижения радиочастотного

воздействия следует держать устройство как можно дальше от тела пользователя или настраивать устройство на меньшую выходную мощность при наличии данной функции.

Функция выбора кода страны будет отключена для продуктов, продаваемых в Канаде.

-12-

Гарантия

США: Ограниченная 2-летняя гарантия Withings – Withings Sleep Analyzer

Компания Withings, улица Мориса Хартманна, 2, Исси-ле-Мулино, 92130 (далее “Withings”) гарантирует, что оборудование под брендом Withings (далее “Продукт Withings”) не содержит дефектов в материале и изготовлении при обычном использовании в соответствии с опубликованными рекомендациями Withings в течение ДВУХ (2) ЛЕТ с даты первоначальной розничной покупки конечным пользователем (далее “Гарантийный срок”). Опубликованные рекомендации Withings включают, в том числе, информацию, содержащуюся в технических характеристиках, правилах безопасности или краткой инструкции. Withings не гарантирует, что устройство Withings будет работать бесперебойно и безошибочно. Кроме того, Withings не несет ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций по использованию продукта Withings